

# **TEST REPORT No. 20-13674-CH3**

Client: Vivantes Service GmbH

Aroser Allee 72-76

13407 Berlin

Involved Persons: Stefan Bürger (Paconsult GmbH)

Sina Esfahlani (Paconsult GmbH)

**Test requirement:** In Anlehnung an *Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2-Pandemie* 

Atemschutzmasken Rev 2: 2020-06-02. Die Prüfung wird ohne Kapitel 2.7 (Kennzeichnung und Informationen des Herstellers) durchgeführt



Written: Max Liebau

(Laboratory Test Engineer)

Signature

August 31, 2020

Reviewed /


**Approved:** Waldemar Lang

(Head of Engineering Laboratory)

Disclaimer: This test does not reflect the full scope of the ZLS document "Testing principle for Corona SARS-CoV-2 pandemic respiratory masks"


Allgemeines										
Projekt Nr.: 20-13674-CH3		Prūfzeitraum: 11.08 28.08.2020		Pruflingsannahme: 10.08.2020						
Prüllabor: Paconsult GmbH Quitzowstr. 47 10559 Berlin	Aroser Allee	Auftraggeber: Vivantes Service GmbH Aroser Allee 72-76 13407 Berlin			Unterschrift Leiter Baumusterlabo 31.08.2020  (W. Lang)					

#### Angaben zum Prüfling (Corona Pandemie Atemschutzmasken: CPA) Тур СРА: KN 95 Ausführung: Nasenbügel, Ohrschlaufen Zigong Weikang Medical Equipment Co., LTD Hersteller: Industrial Park, Xuyang Town, Rong Country, Zigong City, Sichuan Province, China WJKZ-2 Modellbezeichnung: Lot No. 05060203 Ident.-Nr./Artikelnummer: Lieferumfang Kunststoffbeutel in Pappkarton Verpackungsart: Abgabeeinheiten (AE): 3 Stück Verpackungseinheiten (VE) 50 Stück Masken pro VE: 1 Stück Informationsbroschüre: vorhanden

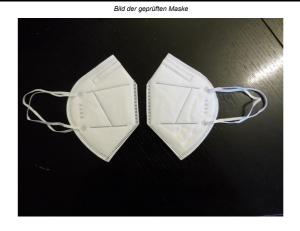





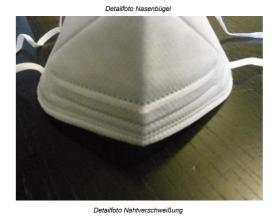



Prüfungen und Test-Ergebnisse										
1. Sichtprüfung										
1.1 Begutachtung gelieferte Muster und Verpackungen										
Kriterium	Beschreibung	Bewertung								
/erpackungsart:	Kunststoffbeutel	i. O.								
Anzahl Masken je Verpackungseinheit (VE):	1	i. O.								
nzahl der Verpackungseinheiten:	50	i. O.								
/erpackung stoßsicher (Schutz vor mechanischer Beschädigung):	Kunststoffbeutel	i. O.								
/erpackung staubdicht:	Kunststoffbeutel dicht	i. O.								
Zustand CPA:	einwandfrei	i. O.								
sbweichungen bei den Verpackungseinheiten	nein	i. O.								
Abweichungen bei den Prüfmustern je VE:	nein	i. O.								
Detailfoto Ansicht der Verpackungseinheit	Detailfoto Anlegeanleitung Verpackungseinheit Detail	foto Herstellerinformation								
Beurteilung Pos. 1.1: Begutachtung der gelieferten Muster und V		bestanden								
Kriterium	Beschreibung	Bewertung								
Gesundheitsunbedenklichkeitsbescheinigung:	liegt vor	i. O.								
Eigengeruch der CPA:	kein Eigengeruch	i. O.								
Pinseltest zum Nachweis, dass sich keine Fasern lösen:										
Pinseltest Maske 1:	keine gelösten Fasern nachweisbar	i. O.								
Pinseltest Maske 2:	keine gelösten Fasern nachweisbar	i. O.								
Pinseltest Maske 3:	keine gelösten Fasern nachweisbar	i. O.								
Beurteilung Pinseltest:	bei 3 von 3 Test keine gelösten Fasern nachweisbar	bestanden								
Mitreißtest, Nachweis, dass keine Fasern bei Durchströmung mit 300										
Mitreißtest Maske 1:	keine gelösten Fasern nachweisbar	i. O.								
	keine gelösten Fasern nachweisbar	i. O.								
	·	bestanden								
ditreißtest Maske 2: Beurteilung Mitreißtest:	bei 2 von 2 Test keine gelösten Fasern nachweisbar	bestanden								

#### In Anlehnung an Prüfung Corona SARS-Cov-2-Virus Pandemie Atemschutzmasken

## 1.3 Ermittlung der Filterlagen

#### Prüfung:

Aufschneiden von je einer Maske aus den drei Verpackungen und separieren der einzelnen Filterlagen

Anzahl der Filterlagen

Maske 1 (aus Verpackung 1):


5

Maske 2 (aus Verpackung 2):

5

Maske 3 (aus Verpackung 3):

5

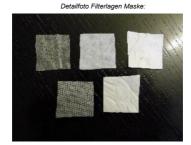

Gesamtbeurteilung 1. Sichtprüfung:

bestanden

bestanden

## 2. Anlegeprüfung

#### Kriterium

CPA leicht anzulegen

CPA leicht abzulegen

Komfort und Stabilität der Kopfbänderung

Nasenbügel - Eignung und Befestigung:

Gibt es offensichtliche Undichtigkeiten: Wahrnehmbare Luftströmung beim Einatmen:

Gesamtbeurteilung 2. Anlegeprüfung:

Ergebnis der Anlegeprüfungen (\*): 3 von 3 Anlegeprüfungen positiv bewertet

Bewertung durch die Testpersonen (TP i)							
TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	TP 5	TP 6	TP 7	Bwtg. (*)
ja	ja	ja	-	-	-	-	i. O.
ja	ja	ja	-	-	-	-	i. O.
i. O.	i. O.	i. O.	-	-	-	-	i. O.
i. O.	i. O.	i. O.	-	-	-	-	i. O.
nein	nein	nein	-	-	-	-	i. O.
nein	nein	nein	_	_	_	_	i O

(\*): Der Test gilt als "bestanden, wenn er entweder vollständig (3 von 3) oder mehrheitlich bestanden wurde (3 von 5 oder 4 von 7)

## 3. Zustand nach Temperaturkonditionierung (24 h bei 70°C)

Zustand CPA: formstabil, Zustand unbeschadet

Gesamtbeurteilung 3. Zustand nach Temperaturkonditionierung: bestanden

### 4. Zustand nach Gebrauchssimulation

Zustand CPA: formstabil, Zustand unbeschadet

Gesamtbeurteilung 4. Zustand nach Gebrauchssimulation: bestanden

